



Bosch HTS 61

# Installatiehandleiding persoonsalarm



# Installatiehandleiding persoonsalarm

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.

Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u tijdens kantooruren naar CSI. Onze kantoor tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten, zodat u direct contact kunt opnemen met onze Customer Care Center indien nodig.

## Stap 1

Voordat u begint met installeren, controleer of het pakket de volgende onderdelen bevat:

1 Alarmapparaat




2 Handzender



3 Voedingsadapter



4 Telefoon snoer

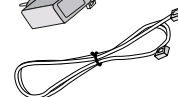

5 Splitter



6 Telefoonstekker




# Installatie

Het persoonsalarm is reeds geprogrammeerd en hiermee klaar voor gebruik. Installeer het persoonsalarm in de buurt van een stopcontact en uw huidige telefoon.


## Stap 2

Sluit de stekker van de meegeleverde voedingsadapter op de bijbehorende aansluiting van het Persoonalarmtoestel aan (deze aansluiting is rood ge-markeerd). Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel, om te voorkomen dat het netsnoer wordt belast als hieraan wordt getrokken (stop de adapter nog niet in het stopcontact).

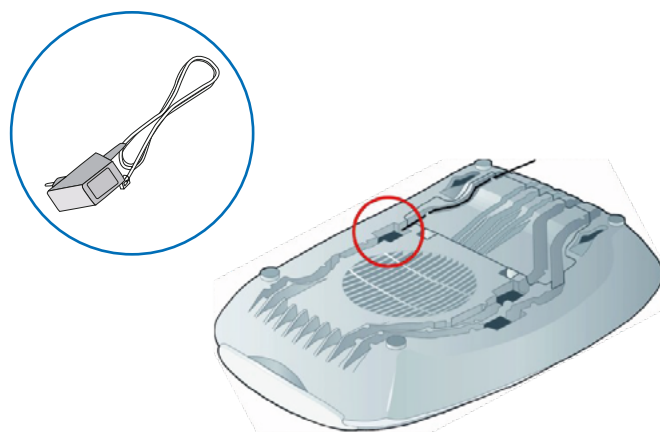


## Stap 3

Plaats de connector van de splitter in de bijbehorende aansluiting op het persoonsalarm. Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel, om te voorkomen dat het snoer wordt belast als hieraan wordt getrokken.

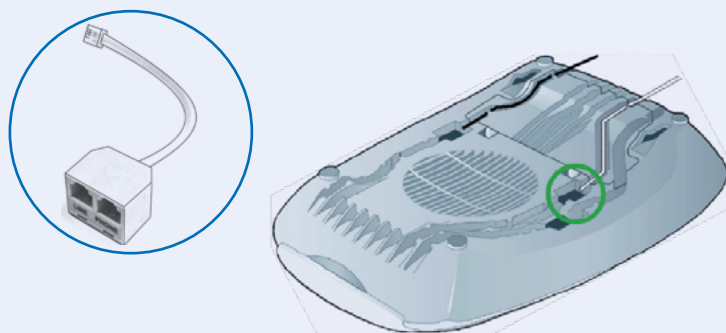



## Stap 4

Haal nu het telefoonsnoer uit uw eigen telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel. Deze zit aan de onder- of achterzijde van uw telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel (basisstation heeft zowel een voedingsadapter als een telefoonaansluiting). Dit kan door het lipje van de doorzichtige connector in te drukken (zie afbeelding) en gelijktijdig de connector uit het toestel te trekken.

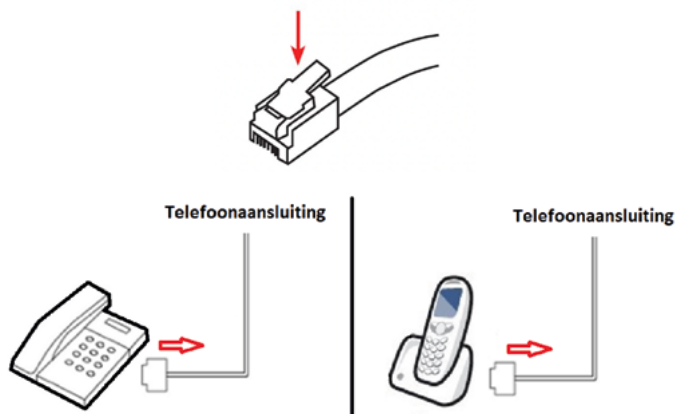



## Stap 5

Plaats nu het los gehaalde telefoonsnoer in de "LINE" aansluiting van de splitter.

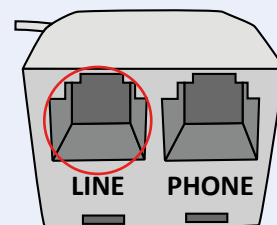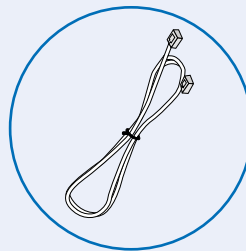

## Stap 6

Plaats de connector van het bijgeleverde telefoonsnoer in de "Phone" aansluiting van de splitter.

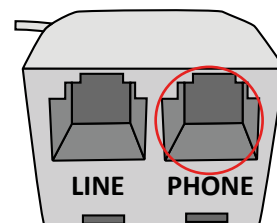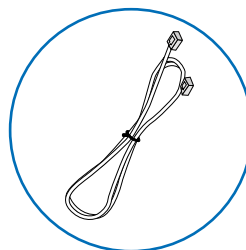


## Stap 7

Stop nu de andere zijde van het telefoonsnoer in de telefoonaansluiting van uw telefoon-toestel (dit is de aansluiting die u in "STAP 3" heeft losgehaald).

De nieuwe situatie

Telefoonaansluiting

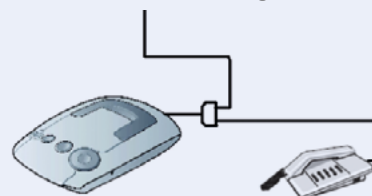


## Stap 8

Sluit nu de voedingsadapter op het stopcontact aan. Alle indicatielampjes branden ongeveer 2 seconden. Als het blauwe lichtje een aantal minuten continu brandt is het apparaat klaar voor gebruik. Dit kan tot 20 minuten duren.

Wanneer het blauwe lichtje uit is, is het apparaat een aantal testen aan het uitvoeren. Uw telefoon kan dan tijdelijk niet werken. Wacht dan 20 minuten tot het blauwe lichtje continu brandt.

Test nu of uw eigen telefoontoestel nog functioneert. Laat ook iemand naar u toe bellen om te controleren of dit ook goed werkt.

Knippert het blauwe lichtje, druk dan 1x op de blauw/grijze knop. Het apparaat vertelt wat de storing is. Wanneer het apparaat een storing meldt, controleer dan of u de voorgaande stappen goed heeft uitgevoerd.

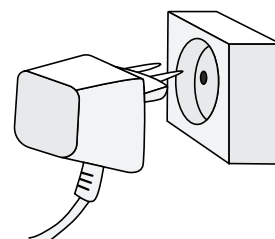

## Stap 9

Lees nu de bijgeleverde informatie kaart door.



## Stap 10

Na het lezen van de informatie kaart wordt het tijd om de werking van het persoonsalarm te testen. U pakt nu uw bijgeleverde handzender erbij. U drukt op de knop van de handzender.

Het persoonsalarm kan een spraakoproep of pieptoon geven. Na ongeveer 1 min. krijgt u een medewerker van de alarmcentrale te spreken.



U geeft nu duidelijk aan dat het om een “nieuwe aansluiting” gaat, en dat u een “proefmelding” maakt.

De medewerker zal vervolgens met u doornemen of alle gegevens goed in het systeem staan. Vervolgens sluit de medewerker het alarm af en zorgt dat het persoonsalarm weer in rust verkeert.



## Gefeliciteerd!

Het apparaat is goed aangeloten. Wij wensen u veel plezier ermee. CSI, een veilig gevoel.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op [www.csipersoonsalarmering.nl](http://www.csipersoonsalarmering.nl) of bel ons 040 - 258 01 55. U kunt mailen naar [service@csicervice.nl](mailto:service@csicervice.nl). Wij helpen graag verder.

### CSI Persoonsalarmering

Biesven 2  
5595 DD Leende  
T: 040 - 258 01 55  
E: [service@csicervice.nl](mailto:service@csicervice.nl)

